

Turbina Pana-Max2 B2

Con conexión Borden



No Óptico



Conexión
BORDEN

Especificación técnica

Rotación (velocidad): 380.000 ~ 480.000 min⁻¹

Tamaño del cabezal: Ø 11,2 x Al 13,4mm

Espray de agua: Spray Simple.


Material del cuerpo: Acero Inoxidable.

Características




Cartucho reemplazable

Las turbinas pueden ser reemplazadas fácilmente y se ahorra tiempo de reparación. Así mismo, el reemplazo de las turbinas facilita el mantenimiento y resuelve problemas tales como el atoramiento de los orificios de spray.

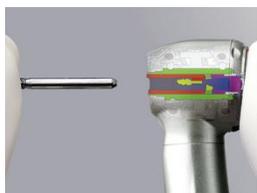

Portafresas Push Botton

Permite insertar y extraer la fresa con un solo toque y sin herramientas. El mecanismo de bloqueo de la fresa está diseñado de modo que la resistencia de la sujeción aumenta cuando se aplican cargas elevadas a la fresa.

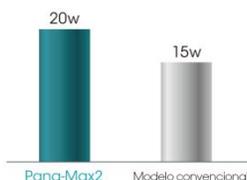

Un 30% más potente

Con una potencia máxima de 20 vatios, este nuevo modelo cuenta con la potencia nominal más elevada de su clase. Esa potencia concentrada y la alta precisión rotacional de la fresa crean un efecto sinérgico que le garantiza rapidez y exactitud en sus tratamientos.

REV180725

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ **Concepción:** Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ **CAD:** Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@expro dental.cl ■ **Web:** www.expro dental.cl