


Lima Reciproc Blue

Aún más flexibilidad y seguridad



Reciproc Blue ha sido diseñado para preparar el conducto radicular con un solo instrumento. En la mayoría de los casos clínicos, Reciproc Blue permite la preparación completa del conducto radicular con un único instrumento.


Reciproc Blue es también es adecuado para el retratamiento de Gutapercha y de obturaciones con vástago.

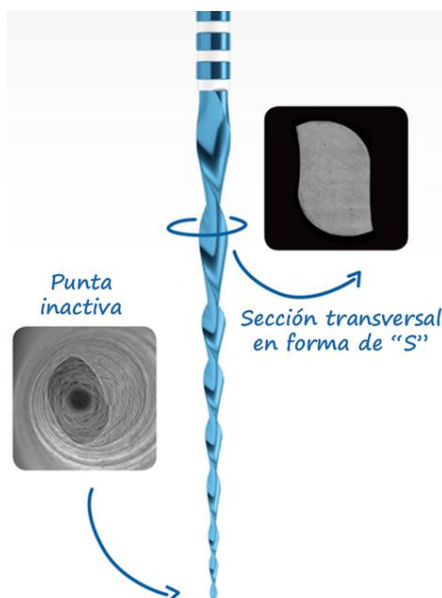

Facilidad de uso insuperable

- Fácil selección del instrumento adecuado para cada caso clínico.
- Menos limas en su secuencia clínica, comparado con instrumentos de rotación continua.
- Menor tiempo de preparación.
- Mango níquel plateado corto de 11mm que permite un mejor acceso a los morales.

La combinación de sección transversal específica en forma de "S", la conicidad, los ángulos de corte y la materia prima térmicamente mejorada

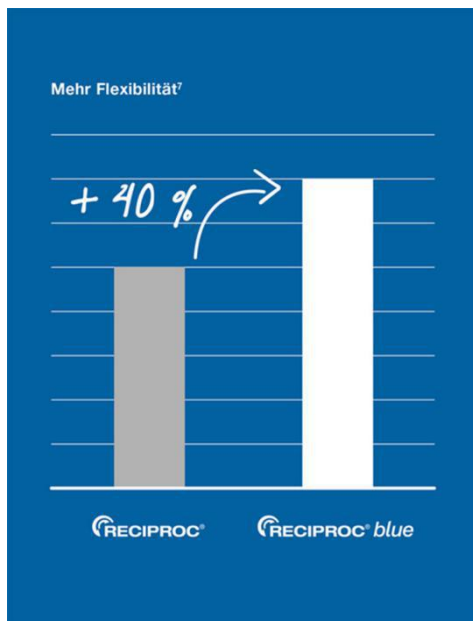




Tratamiento NiTi mejorado

Las limas Reciproc Blue están hechos de níquel-titanio (NiTi). Gracias a un tratamiento térmico innovador, se modifica su estructura molecular de tal forma, que el material se vuelve más flexible y resistente a la fatiga clínica.

Además, tiene la opción de precurvar (máximo 10°) el instrumento, para obtener un acceso más fácil a los conductos, cuando sea necesario.

- Mejor centrado del instrumento entre las paredes del conducto gracias a su mayor flexibilidad.
- Mejor protección contra la fractura del instrumento, debido a una mayor resistencia a la fatiga clínica.
- El instrumento sigue mejor la curvatura natural del conducto radicular.

Conoce la gama Reciproc Blue

Imagen referencia	Descripción	Cod. Producto
	R25 Ideal para conductos estrechos	4120
	R40 Ideal para conductos medios	4121
	R50 Ideal para conductos anchos	4122