

Turbina Pana-Max Plus2

PAP2-SU M4



No Óptico

Especificación técnica

Cód. 3420


Cabezal	Cabezal Estándar
Potencia	30W
Rotación (velocidad)	325.000~410.000 min ⁻¹
Tamaño del Cabezal	Ø12,1 x Al 13,3 mm
Espray de agua	Spray Quattro

Características



Cartucho reemplazable

Las turbinas pueden ser reemplazadas fácilmente y se ahorra tiempo de reparación. Así mismo, el reemplazo de las turbinas facilita el mantenimiento y resuelve problemas tales como el atoramiento de los orificios de spray.

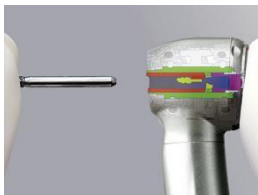

Portafresas Push Botton

Permite insertar y extraer la fresa con un solo toque y sin herramientas. El mecanismo de bloqueo de la fresa está diseñado de modo que la resistencia de la sujeción aumenta cuando se aplican cargas elevadas a la fresa.



Spray de Agua Quattro

El Spray de Agua Quattro de NSK refrigera con efectividad toda la superficie de la fresa con un alto efecto de refrigeración, sin dejar área alguna no tratada.

Rev.240412

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@expro dental.cl ■ Web: www.expro dental.cl